

REVYLINE

Электрлі дыбыстық
тіс щеткасы

RL 030

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



Минутына 20000
дыбыстық тербеліс



Екі ауыстырылмалы
саптамалар




IPX4 су
өткізбеушілік



Жиынтықта
батарейка



Желдеткіші бар
тазартқыш бастиек

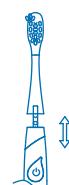

Саптаманы ауыстыру:

Саптаманы тырс еткенше салыңыз, оның сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз.



Батарейканы ауыстыру:

Батарейкаға арналған бөлік қақпағын сағат тіліне қарама-қарсы бағытта бұрыңыз, оны алыңыз. Батарейканы ауыстырғаннан кейін қақпақты сағат тілі бағытында бұраңыз.

Жиынтық:

Металл өзегі бар эргономикалық саптама.
Soft қылышы бар екі саптама.
Жол сауыты.
Батарейка.

Техникалық сипаттамалары:

Діріл жиілігі: минутына 20 000.
Бұйым өлшемі: 190x15x15 мм
Тазартқыш бет өлшемі– 21x9x11 мм
Қылышық ұзындығы: 11 мм.
Қылышық қалыңдығы: 0,15 мм
Куаты: 0,3 Вт
Кернеу: 1,5 В
Батарея түрі: AAA

Қолдану тәсілі:

Тіс пастасын щетканың тазартқыш бастиегінде жағынғыз, оны ауыз қуысына салыңыз және щетканы қосыңыз. Тазалау уақытында тазалау орнын біртіндеп өзгертіп, біркелкі қозғалыстарды жасаңыз. Біз щетканы ауыз қуысынан алмай сөндіруді ұсынамыз, бұл судың және пастаның шашырауының алдын алуға мүмкіндік береді. Содан кейін щетканы ағын сумен жуыңыз. Саптамаларды кемінде 2-3 айда бір рет ауыстыру ұсынылады.

Сақтық шаралары:

Құрал тек тістерді тазалауға арналған, оны арналуы бойынша емес қолдануға болмайды. Кері жағдайда бұл жазатайым оқиғаларға және жарақаттарға алып келу мүмкін. З жастан кіші балаларға қолдануға болмайды. Тазалау үшін спирт құрамды және басқа химиялық заттарды қолдануға болмайды.

Сақтау:

Су қалдықтарын сілкіңіз, тұтқасын құрғата сүртіңіз, табиғи кебу үшін қалған бөлшектерді ашиқ ауада қалдырыңыз. Жоғары температурада және жоғары ылғалдылықта сақтауға болмайды.

Ресей Федерациясындағы импорттаушы МГАДЖЕТ ЖШҚ

Мекенжайы: 140002, Люберцы қ., Октябрьский даңғ., 20-үй, 2-корпус.

Қазақстандағы иморттаушы: МГАДЖЕТ К3 ЖШС, Мекенжайы: Алматы қ., Төле би к-сі, 23а, 24-офис.

Қызмет ету мерзімі 5 жыл.

Таярап сертификатталған.

Өндірілген: Shantou Honglong Industry Co., Ltd. Beihuang South, Yiyang, Xiashan Town, Chaonan District, Shantou, Guangdong 515144, China.

+7 700 219 40 93
www.revyline.kz

