


REVYLINЕ

RL 040

Электрлі дыбыстық тіс щеткасы

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

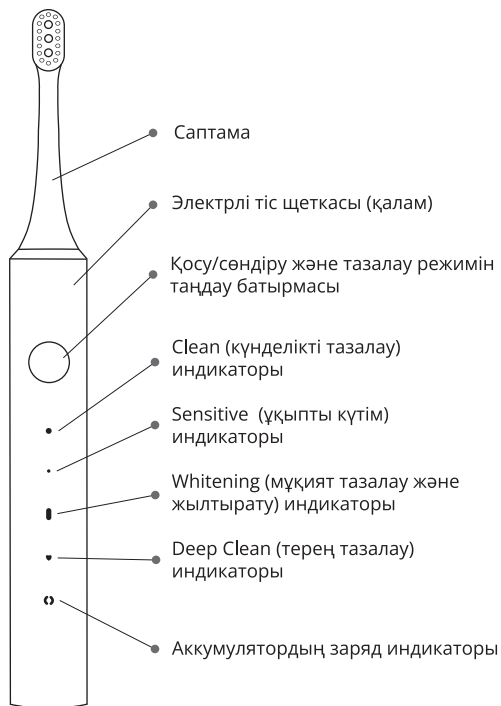

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Revyline RL 040 бірінші рет қолданар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оны сақтаңыз.

Электр жарақаттарының, күйіктердің, өрттердің алдын алу, өзіне және айналасындағыларға зиян келтірмеу үшін:

1. Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
2. Душ қабылдау кезінде щетканы қолданбаңыз.
3. Электр желісіне қосылған зарядтау құрылғысын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
4. Құрылғыны су құйылған ыдысқа немесе шұңғылшаға түсуі мүмкін жерлерде сақтамаңыз.
5. Зарядтау құрылғысы ақаулы немесе күштік кабель зақымдалған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.
6. Тек фирмалық саптамалар мен керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
7. Ауыстырылатын саптамаға арналған ұяшыққа бөгде заттарды салмаңыз.
8. Құрылғыны ыстық беттерден алыс зарядтаңыз.
9. Бұрын оттегі немесе аэрозоль қолданылған бөлмеде щетканы қоспаңыз.
10. Щетканы қолданар алдында барлық алынбалы құрылымдарды ауыз қуысынан алыңыз.
11. Ауыз қуысында немесе тілде жаралар болған кезде құрылғыны қолданбаңыз.
12. Щетканы зарядтау базасында сақтауға болмайды, зарядтау аяқталғаннан кейін щетканы зарядтау платформасынан алыңыз.
13. Revyline RL 040 электрлі тіс щеткасын физикалық мүмкіндіктері шектеулі, психикалық кемістігі бар және осындай құрылғыны пайдалану тәжірибесі жоқ адамдарға (соның ішінде балалар) қолдануға ұсынылмайды.
14. 6 жасқа дейінгі балаларға пайдалану ұсынылмайды. 6 жастан 10 жасқа дейінгі балалар құрылғыны ересек адамның бақылауымен қолдануы керек.
15. Құрылғыны зарядтау кезінде тұтқаның аздап қызуы қалыпты жағдай. Бірақ тұтқа қызып кетсе, қуатты өшіріңіз.

16. Құрылғының қызып кетуіне және бұзылуына жол бермеу үшін қуат адаптерінің түйіспелерін мезгіл-мезгіл тазалап отыру керек.

17. Құрылғыны тікелей күн сәулесінен алыс, құрғақ және жақсы желдетілетін жерде-7°C жоғары немесе +40°C төмен температурада сақтаңыз.

18. Құрылғыны және оның кіріктірілген аккумуляторын кәдеге жарату жалпы қабылданған ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы керек.

МЕДИЦИНАЛЫҚ СИПАТТАҒЫ ЕСКЕРТУЛЕР

Бұл құрылғыны қолданудың басында аздап қан кету және қызыл иектің ыңғайсыздығы қалыпты жағдай. Егер қан кету мен ыңғайсыздық 1 аптадан астам уақытқа созылса, тіс дәрігерімен кеңесу керек.

Егер сіз соңғы 2 айда ауыз қуысына операция жасасаңыз, импланттар немесе протездер қойсаңыз, онда бұл құрылғыны қолданар алдында дәрігермен кеңесу керек.

Егер сізде кардиостимулятор немесе басқа ұқсас имплантацияланған құрылғылар орнатылған болса, құрылғыны қолданар алдында дәрігерге қаралыңыз.

АККУМУЛЯТОРДЫ ЗАРЯДТАУ

Зарядтау USB Type-C сымы арқылы жүзеге асырылады, ол қайырмалы қақпақпен жабылған ағытпаға салынған.

Щетканы зарядтамас бұрын оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

Сымды щеткаға қоспас бұрын, ағытпаның құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

Аккумуляторды зарядтау кезінде индикатор жыпылықтайды. Егер зарядтау кезінде индикатор жыпылықтауды тоқтатса, онда батарея толығымен зарядталған.

Егер батарея заряды таусылған болса, онда пайдалану кезінде батарея индикаторы бірнеше секунд жыпылықтайды, содан кейін өшеді.

Щетка бір зарядтан 30 күнге дейін жұмыс істейді (күніне екі рет 2 минут тазалағанда).

Егер щетка ұзақ уақыт пайдаланылмаса, зарядтау индикаторы бірден жанбайды.

Егер сіз щетканы 6 ай немесе одан да көп уақыт пайдаланбаған болсаңыз, пайдалануды жалғастырмас бұрын аккумуляторды толығымен зарядтау керек.

Назар аударыңыз! Құрылғыны тазалау арасында қайта зарядтамаңыз. Зарядтау деңгейі төмен болған кезде аккумуляторды зарядтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ

Саптаманы тұтқаға салыңыз. Қылшықтарды сулаңыз және аз мөлшерде тіс пастасын жағыңыз.

Жұмысты бастау кезінде пастаның шашырауын болдырмау үшін щетканың бастиегін аузыңызға салыңыз. Басқару батырмасын бір рет басыңыз.

ТАЗАЛАУ РЕЖИМІН ТАҢДАУ

Режимді таңдау (белсендіру/өшіру) басқару батырмасын дәйекті басу арқылы жүзеге асырылады, діріл жиілігінің өзгеруімен бірге жүреді. Әр басу жаңа режимнің дәйекті түрде іске қосылуына әкеледі. Қосылған жарық индикаторы қолданылатын режимге сәйкес келеді.

Revyline RL 040 электр тіс щеткасы 4 жұмыс режимін пайдалануға мүмкіндік береді:

CLEAN – күнделікті тазалау.

SENSITIVE – тістер мен қызылиектерге жұмсақ күтім жасау.

WHITENING – эмальды мұқият тазарту және жылтырату.

DEEP CLEAN – терең тазарту, тістерді 3 минут тазалау.

САПТАМАНЫ ОРНАТУ ЖӘНЕ АУЫСТЫРУ

Саптаманың жұмыс беті щетка корпусының бетіне сәйкес келетіндей етіп металл өзекке сырғыту арқылы саптаманы орнатыңыз.

Тіс дәрігерлері ауыз қуысы гигиенасының жоғары тиімділігін сақтау үшін әр 3 айда саптаманы ауыстыруды ұсынады.

ТАЗАЛАУ ПРОЦЕСІ

Саптаманы отыратын жерге ақырын кигізіңіз. Саптама мен негізгі корпус арасында кішкене алшақтық қалдырыңыз, өйткені дірілді жүзеге асыру үшін алшақтық қажет.

Тіс тазалауға кіріспес бұрын тіс щеткасының тазалағыш бастиегін және оған жағылған тіс пастасын сулаңыз, бұл тіс пастасын тазалау кезінде тістердің бетіне жақсы әсер етеді.

Щетка саптамасын қызылиек сызығына параллель орналастырып, тістердің бетіне жақындатыңыз. Щетканы қосыңыз. Жұмсақ тазалаңыз. Қатты баспаңыз, әйтпесе тістер мен қызылиектің бетіне зақым келтіруі мүмкін. Тазалағыш бастиекті баяу жылжытыңыз, айналмалы-кері қозғалыстар жасаңыз. Біркелкі тазартуды қамтамасыз ету үшін ауыз қуысын

Құттықтаймыз!

Сіз тістеріңіз бен қызылиегіңіздің әдемі және сау болуына мүмкіндік беретін жоғары технологиялық құрылғының иесі болдыңыз. Бірінші қолданғаннан кейін тазалықтың жаңа деңгейін сезініңіз.

төрт бірдей шартты аймаққа бөліп, оларды кезекпен тазалаңыз. 2 минут тазалағаннан кейін щетка автоматты түрде сөнеді.

Тазалау кезінде тазалағыш бастиекке тым қатты қысым жасамау керек.

Тазалау аяқталғаннан кейін ауыз қуысын таза сумен жақсылап шайыңыз.

ТІС ЩЕТКАСЫНА КҮТІМ ЖАСАУ

Revyline RL 040 тіс щеткасын үнемі тазалаңыз. Тазалаудан кейін қалған пастаны кетіру үшін саптаманың тазалағыш бастиегін шайыңыз және оны ауада құрғатыңыз. Деформацияламау үшін қылшықтарды үйкемеңіз. Тазалағаннан кейін кірді кетіру үшін тұтқаны шайыңыз және жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз. Тіс щеткасын суға батырмаңыз. Тіс щеткасын агрессивті жуғыш затпен және 40°C жоғары су температурасында тазаламаңыз.

ЖИЫНТЫҚТАҒЫ САПТАМАЛАР

Revyline RL 040 тіс щеткасының негізгі жиынтығына стандартты ауыстырылатын саптама бар.

Назар аударыңыз! Жеке гигиена ережелеріне сәйкес, әр түрлі пайдаланушылардың бір саптаманы ортақ қолдануына жол берілмейді.

КЕПІЛДІК

Құрылғыға кепілдік – 2 жыл.
Құралға кепілдік берілген техникалық қызмет көрсету қолданыстағы кепілдік мерзімі ішінде тегін жүзеге асырылады. Әрі қарай, щеткаға қызмет көрсету сатып алушының есебінен жүзеге асырылады.

КЕПІЛДІК ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ:

Шығын материалдары мен жиынтықтаушыларына. Келесілердің нәтижесінде істен шыққан және/немесе ақаулы тауарларға:

• оларды мақсатына сай емес пайдалану;

• бүлінуге әкеп соққан абайсызда немесе ұқыпсыз пайдалану (шамадан тыс жүктеуді қоса алғанда);

• уәкілетті емес ұйымның (жеке тұлғаның) түрлендіруі, ашуы және/немесе жөндеуі.

• пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген пайдалану және/немесе сақтау немесе тасымалдау қағидалары бұзылған кезде.

Дұрыс емес қуат көзіне қосылу салдарынан істен шыққан және/немесе ақаулар алған тауарларға. Жойылмаған кемшіліктермен пайдаланылған тауарларға.

Үшінші тұлғалардың әрекеттері, табиғат құбылыстары

және табиғи апаттар, үй жануарлары мен жабайы жануарлар, жәндіктер, тауарлардың бөгде заттар мен сұйықтықтардың енуі сияқты өндірушіге тәуелді емес себептерден туындаған ақауларға.

Пайдалану процесінде және табиғи тозу нәтижесінде пайда болған сыртқы және ішкі ластануларға, сызаттарға, жарықтарға, тозуға және өзге де механикалық зақымдануларға.

ЖИЫНТЫҚ:

Негізгі щетка блогы.
Ауыстырылатын саптама – 1 дана.
USB Type-C сымы.
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық және кепілдік талоны.

Техникалық сипаттамалары

Үлгі: RL 040

Тістерді тиімді тазартуға арналған.

X-Waves – кавитация әсері.

Қылшықтардың тербеліс жиілігі – минутына 33 000-42 000.

4 Жұмыс режимі – Clean, Sensitive, Whitening, Deep Clean (тазалау 3 мин.).
Корпус материалы-ABS-пластик.

DuPont қылшықтары.

Қуат – литий-ионды аккумулятор (800 mAh).

Толық зарядтау уақыты – 7 сағат.

Толық зарядталғаннан кейін аккумулятордың қызмет ету мерзімі – 30 күн.

IPX7 ылғалдан қорғау.

Өлшемдері – 223×26×24 мм.

Тазалау бетінің өлшемі – 18x8x11 мм.

Қылшықтардың ұзындығы: 11 мм.

Қылшықтардың диаметрі 0,152 мм.

Кепілдік: 2 жыл.

Ресей Федерациясындағы импорттаушы

МГАДЖЕТ ЖШҚ

Мекенжайы: 140002, Люберцы қ., Октябрьский даңғ.,
20-үй, 2-корпус.

Қазақстандағы импорттаушы: МГАДЖЕТ КЗ ЖШС

Мекенжайы: Алматы қ., Төле би к-сі, 23а, 24-офис.

Қызмет ету мерзімі 5 жыл.

Тауар сертификатталған.

Өндірілген: Shenzhen Fortunecome Technology Co., Ltd., No.57 Shangxia Road, Shangxia-wei, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen City, China.

Егер сізде сұрақтар туындаса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

+7 700 219 40 93

www.revyline.kz

Кепілдік талоны

Ұйымның атауы

Сату күні

Мөрге арналған орын