


REVLINЕ

RL 070 Smart

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

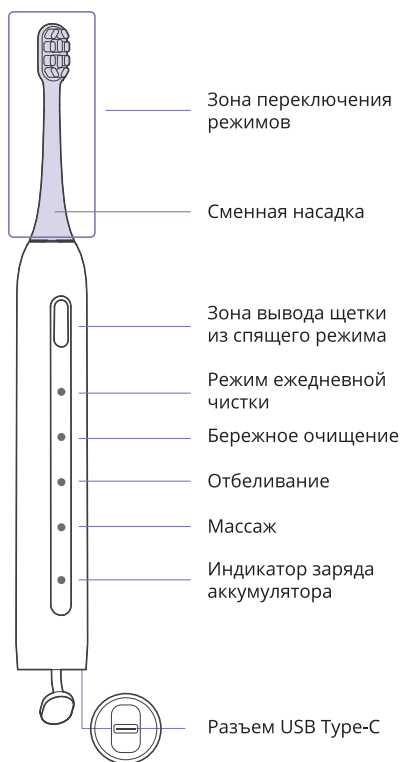

Поздравляем!

Вы стали обладателем высокотехнологичного устройства, которое позволит вашим зубам и деснам быть красивыми и здоровыми. Испытайте новый уровень чистоты уже после первого применения.

Благодаря сенсорному датчику «умная» щетка управляется прикосновениями и имеет простое, интуитивно понятное управление.

X-Waves – эффект кавитации: за счет звукового принципа работы смесь пасты, слюны и воды образует пузырьки. Схлопываясь, они производят ударные волны, которые отделяют налет от эмали.

Меры предосторожности

Перед первым применением щетки Revlyne RL 070 Smart внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее.

Для предотвращения электротравм, ожогов, пожаров, нанесения вреда себе и окружающим:

1. Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
2. Не используйте щетку во время принятия душа.
3. Не трогайте влажными руками зарядное устройство, подключенное к электросети.
4. Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в емкость с водой или раковину.
5. Не используйте прибор при неисправности зарядного устройства или повреждении силового кабеля.
6. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
7. Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
8. Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.
9. Не включайте щетку в помещении, где ранее использовался кислород или аэрозоли.

10. Перед использованием щетки удалите из полости рта все съемные конструкции.
11. Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
12. Использование щетки детьми возможно только под присмотром взрослых.
13. Не следует хранить щетку на зарядной базе, по окончании зарядки снимите щетку с зарядной платформы.
14. Электрическую зубную щетку Revlyne RL 070 Smart не рекомендуется использовать лицами (в т.ч. детьми) с ограниченными физическими возможностями, психическими нарушениями и отсутствием опыта использования подобного прибора.
15. Не рекомендуется для использования детьми до 6 лет.
16. Детям от 6 до 10 лет следует использовать устройство под присмотром взрослого.
17. Небольшое нагревание ручки во время зарядки прибора является нормальным. Но если ручка становится горячей, отключите питание.
18. Время от времени следует очищать контакты адаптера питания, чтобы избежать перегрева прибора и поломок.
19. Храните устройство вдали от прямых солнечных лучей, в сухом и хорошо проветриваемом месте при температуре не ниже -7°C и не выше $+40^{\circ}\text{C}$.
20. Утилизация прибора и его встроенного аккумулятора должна осуществляться в соответствии с общепринятыми правилами.

Предупреждения медицинско-ского характера

Небольшая кровоточивость и дискомфорт десен в начале использования данного устройства являются нормой. Если кровотечение и дискомфорт сохраняются более 1 недели, следует обратиться к стоматологу.

Если в последние 2 месяца вы перенесли операцию в ротовой полости, установили импланты или протезы, то перед началом использования данного устройства следует проконсультироваться с врачом.

Если у вас установлен кардиостимулятор или другие подобные имплантированные устройства, перед использованием прибора обратитесь к своему врачу.

Зарядка аккумулятора

Зарядка осуществляется с помощью провода USB Type-C, который вставляется в разъем, прикрытый откидной крышкой. Перед зарядкой щетки убедитесь, что она выключена.

Перед тем как подключить провод к щетке, убедитесь, что разъем сухой. Щетка работает до 90 дней после полной зарядки аккумулятора (при двухразовой ежедневной чистке по 2 мин.). Полная зарядка аккумулятора занимает 7 часов. Всегда тщательно закрывайте заглушку после зарядки.

Если вы не пользовались щеткой 6 месяцев и более, то перед возобновлением использования следует полностью зарядить аккумулятор.

Внимание! Не подзаряжайте устройство между чистками. Производите зарядку аккумулятора тогда, когда уровень заряда становится низким.

Если индикатор зарядки аккумулятора мигает – прибор пора заряжать.

Включение прибора

Вставьте насадку в рукоятку так, чтобы направление щетины совпало с передней частью корпуса щетки.

Намочите щетину и нанесите небольшое количество зубной пасты.

Нажмите на зону активации, чтобы вывести щетку из спящего режима.

Поместите головку щетки в рот. При прикосновении к зубам щетка включится автоматически.

Выбор режима чистки

Выбора режима осуществляется прикосновением к задней поверхности чистящей головки, сопровождается сменой частоты вибрации. Каждое прикосновение приводит к последовательной активации нового режима. Включенный световой индикатор соответствует режиму, который используется.

Электрическая зубная щетка Revlyne RL 070 позволяет использовать 4 режима работы:

Ежедневная чистка – быстрое и тщательное удаление налета каждый день

Бережная чистка – режим рекомендован при повышенной чувствительности зубов и десен

Отбеливание – глубокое очищение и полировка эмали

Массаж – режим для улучшения кровообращения и здоровья десен Revlyne RL 070 Smart запоминает последний выбранный режим работы.

Установка и замена насадки

Установите насадку, надев ее на металлический стержень таким образом, чтобы рабочая поверхность насадки совпала с лицевой стороной корпуса щетки.

Стоматологи рекомендуют менять насадку каждые 3 месяца для сохра-

нения высокой эффективности гигиены полости рта.


Процесс чистки

Аккуратно наденьте насадку на посадочное место. Оставьте небольшой зазор между насадкой и основным корпусом, так как зазор необходим для возможности осуществления вибрации.

Намочите чистящую головку зубной щетки и нанесенную на нее зубную пасту, прежде чем вы приступите к чистке зубов, это поможет зубной пасте лучше воздействовать на поверхность зубов во время чистки.

Поднесите насадку щетки к поверхности зубов, расположив параллельно линии десен. Щетка включится сама при прикосновении щетинок к зубам.

Не надавливайте слишком сильно, иначе можете травмировать поверхность зубов и десен. Перемещайте чистящую головку медленно, совершая вращательно-возвратные движения.

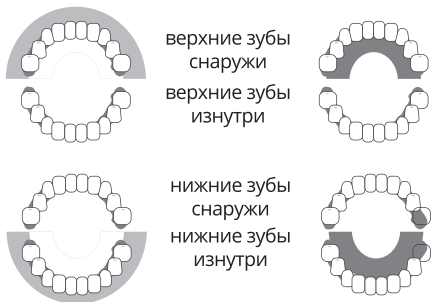

Для обеспечения равномерного очищения разделите полость рта на четыре равных условных зоны и очищайте их поочередно. Каждые 30 секунд щетка вибрацией напоминает о необходимости сменить зону чистки зубов.

После 2 минут чистки щетка отклю-

чается автоматически.

Во время чистки не следует надавливать на чистящую головку слишком энергично.

Предусмотрена защита от чрезмерного давления

После завершения чистки тщательно прополощите рот чистой водой.

Уход за зубной щеткой

Регулярно очищайте зубную щетку Revyline RL 070 Smart. Промойте чистящую головку насадки, чтобы удалить остатки пасты после чистки, и дайте ей высохнуть на воздухе. Не трите щетину, чтобы не деформировать ее. Ополосните рукоятку, чтобы удалить загрязнения после чистки, и высушите мягкой тканью. Не погружайте зубную щетку в воду. Не чистите зубную щетку агрессивным моющим средством и при температуре воды выше 40°C.

Насадки в комплекте

В базовой комплектации зубной щетки Revyline RL 070 Smart 3 стандартные сменные насадки.

Внимание! Согласно правилам личной гигиены, совместное использование одной насадки различными пользователями недопустимо.

Гарантия

Гарантия на прибор – 2 года.

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание щетки осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется:

На расходные материалы и комплектующие.

На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие:

- применения их не по назначению;

• неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям;

• модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом);

• нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации.

На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания.

На товары, эксплуатировавшиеся с неустранимыми недостатками.

На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадающие внутрь товаров посторонних предметов и жидкостей.

На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

Комплектация:

- Основной блок щетки Revyline RL 070 Smart
- 3 сменные насадки
- Кабель USB Type-C
- Дорожный чехол
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: RL 070 Smart.

Предназначена для эффективной чистки зубов.

Звуковой принцип работы

Сенсорный датчик

Включение при прикосновении щетины к зубам

4 режима работы: ежедневная чистка, бережная чистка, отбеливание, массаж десен

Материал: пластик ABS и щетина DuPont

Таймер на 2 минуты

Частота колебаний 33 000–36 000 в минуту

Аккумулятор работает до 90 дней

Время полной зарядки – 7 часов

Емкость аккумулятора – 2000 mAh

Зарядка через провод USB Type-C

Уровень влагозащиты: IPX7

X-Waves – эффект кавитации

Гарантия: 2 года.

Изготовлено по заказу ИП Обушковой Д. С., г. Москва, ул. Первомайская, д. 42

Производитель: Dongguan Infly Life Technology Co., Ltd., Room 202, Building 1, No.36 Caixin Road, Daojiao Town, Dongguan, Guangdong, China

Гарантийный талон

Название организации

Дата продажи

Место для печати

По всем вопросам обращайтесь на горячую линию:

8 (800) 775-38-49

www.revyline.ru