

REVYLINE

RL 400

Ирригатор полости рта



режима
давления



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА REVYLINE RL 400

Сочетание высокого давления и пульсирующей технологии подачи воды помогает ирригатору Revyline RL 400 очищать пришеечную область зубов и десневую борозду, что недоступно для обычной зубной щетки. Использование ирригатора существенно повышает уровень гигиены полости рта, предотвращает возникновение и развитие стоматологических заболеваний. Пульсирующий водный поток стимулирует кровоснабжение в деснах и улучшает их состояние.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во избежание возникновения дискомфорта, перед первым применением ирригатора Revyline RL 400, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее.

Для предотвращения электротравмы:

1. Не опускайте прибор в воду или другую жидкость.
2. Не используйте ирригатор во время принятия душа.
3. Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в емкость с водой, трубу или раковину.

Для уменьшения риска возникновения пожара, получения ожогов, электротравм:

1. Не используйте прибор при неисправности зарядного устройства или повреждения силового кабеля, внезапного прекращения работы и падения в воду.
2. Не направляйте поток воды под язык, в уши, нос или другие чувствительные участки. Прибор генерирует мощную водную струю, которая может нарушить целостность кожи и слизистых оболочек.
3. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
4. Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.
5. Не включайте ирригатор в помещении, где ранее использовался кислород или аэрозоли.
6. Не заливайте в резервуар ополаскиватели, содержащие йод, отбеливающие ингредиенты или масло чайного дерева. Они снижают эффективность и срок службы прибора.
7. Заливайте в резервуар воду или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.
8. Перед использованием ирригатора, удалите из

полости рта все съемные конструкции.

9. Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
10. Если вы принимаете антибиотики непосредственно перед проведением профессиональной гигиены полости рта, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед первым применением ирригатора или других средств по уходу за полостью рта.
11. Использование ирригатора детьми возможно только под присмотром взрослых.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым применением устройства извлеките резиновую заглушку из основания прибора, подключите разъем зарядного устройства и полностью зарядите аккумулятор (примерно 4 часа). После завершения зарядки установите резиновую заглушку обратно на корпус прибора.

Резиновая заглушка
для зарядки прибора



ВНИМАНИЕ!

Кабель для зарядки ирригатора Revyline RL 400 не подходит к 5V USB-зарядке, используемой для мобильных телефонов, ноутбуков и внешних жестких дисков.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА


Откройте крышку резервуара, наполните кипяченой, очищенной водой. Для включения прибора 1 раз нажмите кнопку включения питания. По умолчанию установлена наиболее низкая мощность водной струи. На корпусе прибора загорится LED-индикатор. Нажмите кнопку включения во второй раз для активации режима с умеренным давлением воды. Для включения режима с наиболее высокой мощностью водной струи, нажмите кнопку включения питания в третий раз. Чтобы выключить ирригатор, нажмите кнопку включения питания в четвертый раз.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА НАСАДКИ

Установите насадку в разъем, расположенный на верхней части ирригатора, и поверните ее до полной блокировки. Для удаления насадки удерживайте нажатой кнопку блокировки и извлеките насадку из корпуса прибора.

РЕЖИМ ИРРИГАЦИИ

Расположите насадку под углом 90 градусов к поверхности десен. Во избежание разбрызгивания воды, сомкните губы. Вода должна естественным образом стекать из полости рта в раковину. Для получения лучших результатов вначале обработайте область боковых зубов, а затем передних. Продвигайте насадку вдоль контура десны, задерживая ее в межзубных промежутках. Выполняйте процедуру до тех пор, пока не очистите все зубы с внутренней и наружной стороны.

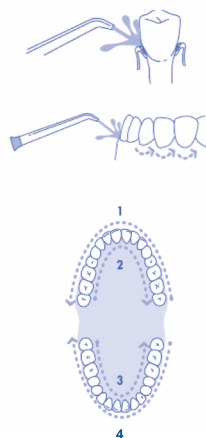


Для их ликвидации наполните резервуар теплой водой, а затем добавьте специальное средство Revyline для очистки ирригатора. Направьте насадку в сторону раковины. Включите устройство на низкой мощности и дождитесь, пока резервуар полностью не освободится. Промойте резервуар чистой водой.

Аккумулятор устройства является съемным. Чтобы избежать травм или несчастных случаев, связанных с его работой, используйте только штатные аккумуляторы, предусмотренные заводом-изготовителем.

НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ



Две стандартные насадки

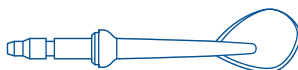

Насадка для очистки языка для свежести дыхания



Пародонтальная насадка для очистки пародонтальных карманов

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ИРРИГАЦИИ

Нажмите кнопку выключения питания. Слейте оставшуюся в резервуаре жидкость. При необходимости извлеките резервуар из корпуса прибора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЕЙ И РАСТВОРОВ

Для лучшего эффекта, рекомендуется использовать ополаскиватели и специализированные бальзамы Revyline. Расчет дозировки производите согласно инструкции используемого средства. После каждого использования растворов, необходимо промыть ирригатор. Для этого наполните резервуар раствором чистящего средства Revyline, поверните насадку по направлению к раковине и включите прибор. Продолжайте процедуру до полного опустошения резервуара. Данная манипуляция позволит удалить остатки растворов из системы ирригатора и предотвратит ее засорение.

Внимание: В состав некоторых ополаскивателей для полости рта входит спирт, который при длительном нахождении в системе прибора может повредить его детали и в конечном итоге, снизить срок его эксплуатации.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не погружайте устройство в воду. Используйте мягкую ткань и мягкий неабразивный очиститель для очистки поверхности прибора. Для облегчения чистки резервуара, его необходимо отсоединить от корпуса. При регулярном использовании жесткой воды на деталях прибора могут образовываться известковые отложения.

ГАРАНТИЯ

Гарантия на прибор 2 года.

В течение 2 лет с момента покупки предоставляется бесплатное сервисное обслуживание ирригатора в сервисном центре. После этого срока обслуживание ирригатора осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как насадки.

Техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока.

В случае возникновения вопросов, связанных с эксплуатацией прибора, звоните на горячую линию:

8 (800) 700-53-60

www.revyline.ru

ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА REVYLINE

Модель RL 400

Предназначен для профилактики болезней зубов и десен.

Питание от литиевого аккумулятора 2000 мА.

Потребляемая мощность: 12 Вт.

Давление воды: минимальное - около 413 кПа, максимальное - не менее 820 кПа.

Ёмкость резервуара: 240 мл.

Вес: 560 г.

Размеры ирригатора без насадки: 238x99x68 мм.

Товар не имеет срока годности.

Средний срок службы: 5 лет.

Хранить при комнатной температуре.

Произведено по заказу ИП Обушенков М.А.,

г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 13, к. 1.

Сайт: www.revyline.ru. Тел.: 8(800)700-53-60.

Изготовлено: Yaoxin Electronic Technology (Shanghai)

Co. Room 101, Tower 1, No. 1501, Jinsui Road, China

(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China

(Mainland).

Гарантия 2 года

Гарантийный талон

Название организации

Дата продажи.....

Место для печати